



Умные весы Picooc Mini Pro V2

Руководство пользователя



Соединение

01 Откройте упаковку и вставьте батарейки.



Удалите прозрачную защитную пленку, откройте крышку батарейного отсека под весами, установите батарейки и закройте крышку.



02 Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение PICOOC, зарегистрировать аккаунт, а затем следуйте инструкциям.

Для старых аккаунтов, пожалуйста, выберите "Настройки – Управление устройством" в приложении PICOOC, выберите знак "+", а затем действуйте в соответствии с руководством.



Вы также можете найти приложение PICOOC в App Store или Google Play.

* Некоторые методы соединения могут измениться в связи с обновлениями приложения, пожалуйста, следите за последними версиями.

Определение веса.

- 01** Перед взвешиванием, для обеспечения точности, пожалуйста, расположите устройство на твердой и ровной поверхности.

Погрешности могут быть больше для следующих пользователей:

Растущие дети

Лица пожилого возраста

Люди, испытывающие озноб из-за простуды и т.п.

Пациенты с остеопорозом с очень низкой минеральной плотностью костей

Пациенты с отечностью

Пациенты с искусственным диализом

Лица, занимающиеся фитнесом или спортом (или аналогичными занятиями)

Пожалуйста, максимально избегайте использования весов в следующих ситуациях:

После интенсивных физических упражнений

После сауны или ванны

После сильного опьянения

После употребления большого количества воды и еды

- 02** Нажмите "Измерить" в приложении и используйте устройство, будучи босиком


* Измерение будучи босиком обязательно для правильного определения количества жира и других данных

* Пожалуйста, становитесь на устройство правильно: примите центр за исходное положение и расположите ступни естественным образом с обеих сторон.

* Слишком близкое расположение к краю может привести к переворачиванию устройства и причинить травмы, либо повлиять на точность измерения.



- 03 Числовые LED-показатели могут меняться на протяжении нескольких секунд во время измерения. После окончания измерения колебание прекратится и появится обозначение веса.

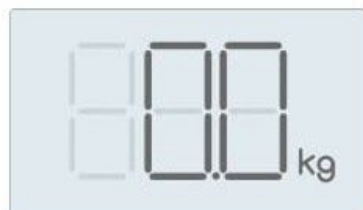

- 04 Когда измерение успешно закончится, данные отправятся в приложение PICOOC, и вы сможете проверить измерения и анализ полученных данных в своем приложении.




* Используйте весы совместно с приложением, чтобы получить множественные данные о состоянии организма пользователя, включая 6 параметров (вес, индекс массы тела, жир, мышцы, костная масса, вода) из BIA и другие 5 параметров (тип телосложения, соматический возраст, уровень белков, основной обмен, внутренний жир) из PHMS

* BIA (анализ биоэлектрического сопротивления) - это спектроскопия электрического импеданса, не исключающая таких погрешностей, как индивидуальные различия

* PHMS (P система дозиметрического измерения) - это оценка здоровья организма и система контроля, разработанная PICOOC™.

* Любые данные или рекомендации в приложении носят исключительно ознакомительный характер, они не обозначают и не заменяют профессиональную диагностику медицинских учреждений

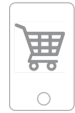

Эксплуатация и обслуживание

- ⚠ Пациенты с кардиостимулятором или другим медицинским оборудованием не должны использовать данное устройство!
- ⚠ Если вы беременны, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед
- ⚠ Не используйте устройство на скользких поверхностях
- ⚠ Устройство покрыто стеклянным покрытием. Во избежание травм, перед применением, пожалуйста, убедитесь, что стекло не повреждено.

- При использовании расположите устройство на твердой и ровной поверхности и не подкладывайте под него другие предметы.
- Для определения процента жира в организме и других результатов, пожалуйста используйте устройство босиком.
- Не царапайте поверхность твердыми предметами, это может повредить устройство.
- Если устройство переносили или передвигали, пожалуйста, перезагрузите его.
- Расположите устройство на ровной и твердой поверхности, аккуратно встаньте на него одной ногой, до тех пор пока включится экран, затем уберите ногу и подождите 3 секунды, чтобы закончить перезагрузку.
- Не используйте устройство вблизи электромагнитных полей.
- Не используйте устройство в следующих местах: неустойчивые поверхности, влажные поверхности (такие, как ванная комната), пыльные поверхности, а также в местах с резкими перепадами температур или под прямыми солнечными лучами.
- Не промывайте и не очищайте устройство горячей водой, агрессивными моющими средствами или другими жидкостями, при загрязнении используйте мягкую ткань и чистую воду, а затем протрите сухой тряпкой.
- Не разбирайте устройство и не очищайте его самовольно.
- Если устройство не будет использоваться длительное время, пожалуйста, извлеките батарейки и храните его должным образом.
- Проглатывание батареек может быть опасным. Батарейки должны храниться в недоступном для детей и животных месте.
- Батарейка в комплекте неперезаряжаемая.
- Пожалуйста, не используйте разные батарейки в одном устройстве и при необходимости заменяйте все батарейки.
- Не выбрасывайте батарейки с мусором и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сдавайте отработанные батарейки в специализированные пункты приема утильсырья
- Когда устройство придет в непригодность из-за дефектов или когда вы им больше не будете пользоваться, необходимо утилизировать его, в соответствии с местными нормативами вашей страны. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными органами управления для более подробной информации.
- Пожалуйста, храните руководство должным образом и предлагайте его другим перед использованием устройства, руководство должно быть включено в комплект.

Гарантии и техническая поддержка.

Для знакомства с гарантийными условиями и условиями технического обслуживания вы можете проконсультироваться со своим дилером. Вы можете ознакомиться с информацией о дилерах, а также узнать больше об устройстве на соответствующих веб-сайтах. <http://www.picooc.com/en>