



магазин
ИННОВАЦИЙ



Перкуссионный массажер с подогревом Picooc H1 Heat

руководство пользователя





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор на шее, голове или на других частях тела, где мало мышц.
- Не используйте прибор на позвоночнике и шейном отделе позвоночника, а также на частях тела рядом с этими двумя областями.
- Не используйте этот прибор на лице, тыльных сторонах рук и пр.
- Не используйте этот прибор на выступающих костях и суставах.
- Не используйте этот прибор на поврежденных мышцах, коже или суставах.
- Не используйте этот прибор, если из-за него появляются синяки, признаки боли и дискомфорт.
- Этот прибор не предназначен для детей в возрасте до 8 лет. Не давайте детям использовать, чистить или обслуживать прибор без надзора взрослых!
- Не помещайте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия прибора.
- Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадание воды в вентиляционные отверстия прибора!
- Держите прибор вдали от открытого огня.
- Во избежание несовместимости используйте адаптер питания, предоставленный нашей компанией.
- Не разбирайте продукт самостоятельно.
- Остерегайтесь попадания пальцев и волос в зону между внутренней поверхностью массажной головки и рычага. Это может привести к травмам.
- Во время работы устройства не помещайте пальцы в зазор между корпусом и массажной головкой, даже если массажная головка не установлена. Это может привести к травмам.
- Не заряжайте прибор слишком долго. Отсоединяйте адаптер питания, когда горят пять индикаторов заряда.
- Не берите этот прибор в салон самолета. Строго соблюдайте правила безопасности авиакомпании, услугами которой пользуетесь.


БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием прибора.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
- Не используйте прибор во время зарядки!
- Перед использованием проверьте прибор.
- После часа непрерывной работы прибора выключайте его на 30 минут.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Если что-то из нижеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора. Выполняйте указания врача!

- Беременность
- Установленный кардиостимулятор или другие электронные медицинские устройства.
- Послеоперационный период
- Болезни позвоночника, суставов или костей.
- Кожа подвержена образованию синяков из-за тонких стенок кровеносных сосудов, нарушения свертываемости крови или других заболеваний.
- Заболевания или осложнения, вызванные использованием прибора без получения разрешения от врача использовать этот прибор.

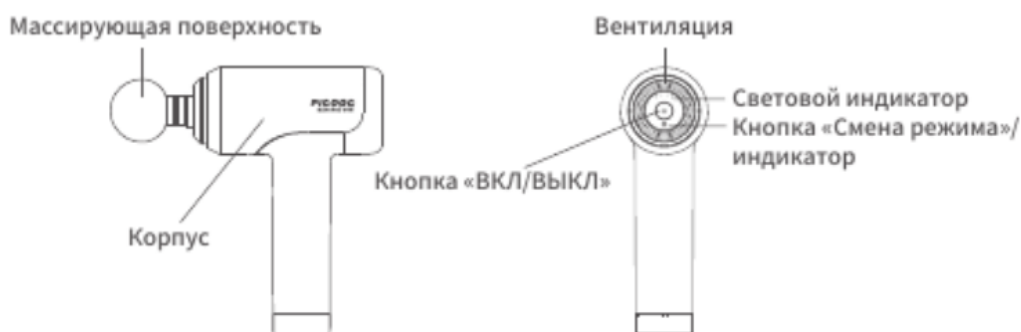

*С разными моделям приборов поставляется разное количество массажных насадок.



ХАРАКТЕРИСТИКИ




Ультранизкая



Низкая



Средняя

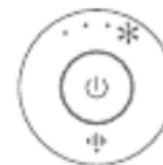

Высокая

Четыре постоянные скорости работы:

Ультранизкая, низкая, средняя, высокая.

Четыре режима с переменной скоростью:

Для каждого режима с фиксированной скоростью работы предусмотрен переменный режим.

Принудительная остановка

При слишком сильном давлении массажер может перейти в режим защиты и выключиться.

Индикатор заряда аккумулятора

Мигающий индикатор показывает процент заряда аккумулятора после того, как массажер выключается. Каждый светодиод обозначает 25% заряда батареи.

Индикатор заряда аккумулятора

Мигающие индикаторы указывают, что батареи заряжаются. Четыре горящих светодиода обозначают полностью заряженный аккумулятор.

Автосохранение настроек:

При выключении массажера автоматически сохраняются последние использованные настройки режима работы.

Функция подогрева (для отдельных моделей):

Массажер автоматически включает подогрев при использовании насадки для термотерапии. Температуру можно регулировать в диапазоне от 40°C до 48°C, при температуре окружающего воздуха 25°C.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», загорится светодиодный индикатор.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и удерживайте ее 3 секунды, пока индикатор не мигнет дважды.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Чтобы изменить скорость работы, нажимайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Мигающий светодиодный индикатор указывает на выбранную скорость.

СМЕНА РЕЖИМА РАБОТЫ

Нажмите на кнопку «Смена режима» и выберите режим работы массажера: постоянный или переменный.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите и долго удерживайте кнопку «Настройка температуры» у выключенного массажера с установленной насадкой для термотерапии. Температура изменится при коротком нажатии кнопки, индикаторы температуры будут последовательно загораться.

"Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Настройка температуры», чтобы войти в режим настройки температуры. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Настройка температуры», чтобы сохранить настройки температуры. "





УТИЛИЗАЦИЯ

Если прибор неисправен или вы планируете его утилизировать, он должен быть переработан в соответствии с правилами переработки электрического и электронного оборудования, действующими в вашей стране. Обращайтесь в местные органы власти за разъяснением порядка утилизации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

- Очищайте прибор слегка влажной салфеткой, а затем насухо вытирайте мягкой тканью.
- Храните устройство в комплектном футляре.
- Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении без агрессивных газов. Не ставьте более пяти посторонних предметов на прибор.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, его следует очистить, упаковать и убрать на хранение. Заряжайте и разряжайте аккумулятор каждые шесть месяцев.
- Прибор можно перевозить на автомобиле, поезде, корабле и в самолете.
- Прибор требует бережного обращения. Во время транспортировки закрепляйте прибор во избежание сильной вибрации, ударов или падений. Он должен быть расположен правой стороной вверх и защищен от дождя.